



Pression de Travail

•Patient Obstructif :

- 1 à 2 Bars
- Pression Expiratoire :
20cm H₂O

•Patient Restrictif :

- 2 à 3,5 Bars
- Pression Expiratoire :
•30 cmH₂O



Fréquence de Percussions

•Patient Obstructif :

- Objectif Désencombrement**
- Fréquences rapides de Percussion
- 300 à 500 cycles/min
- Objectif Recrutement :**
- Fréquences Lentes de Percussion
- 150 à 300 Cycles/min

•Patient Restrictif :

- Objectif Recrutement :**
- Fréquences Lentes de Percussion
- 100 à 250 Cycles/min
- Objectif Désencombrement :**
- Fréquences Rapides de Percussion
- 200 à 300 Cycles/min



Temps de Travail

• Patient Obstructif :

- Objectif Désencombrement :**
- 15 min de Percussions Rapides
- **Objectif Recrutement :**
- 5 min de Percussions Lentes

•Patient Restrictif :

- Objectif Recrutement:**
- 15 min de Percussions Lentes
- Objectif Désencombrement:**
- et 5 min de Percussion Rapide




REGLAGES

- Pression de travail
- Fréquence



PARAMETRES

- Pression Expiratoire
- Saturation

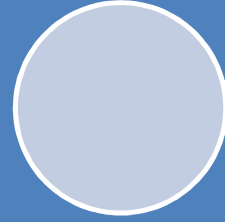

OBJECTIFS

- Désencombrement
- Recrutement

